

Attainment Company

GoTalk[®]20+

kasutus-
juhend

Taset näitavad
märgutuled
(rohelised)

Mikrofon

Kõlar

Põhisõnavara
klahvid
Igaüks 12 sekundit

Sõnumiklahvid
Igaüks 8 sekundit
kõigil viiel tasemel

Tagantvaade

SALVESTUSNUPP

Sisse-/
välja-
lüüti

Taseme
kustuta-
mine

Patareipesa

Salvestuse märgutuli (punane)

Helitugevuse reguleerimine

Tasemevahetusnupp

Sisseehitatud
klahvikaitse

Plastist siseosa

Ülekattesakk ja
ülekattete hoiukoht
(piltvihjed ei kuulu
komplekti)

Salvestuse
kogukestus:
15 minutit
(900 sekundit)

Mõõtmed: 9" x 12" x 1 1/8" Mass: 20 untsi

Sõnumiklahvide alla salvestamine

Lülitage GoTalk 20+ sisse. Kuulete helisignaali. Vajutage salvestusnuppu. Taseme märgutuli (roheline) ja salvestuse märgutuli (punane) süttivad põlema. Vajutage märgutule põlemise ajal sõnumiklahvi, mille alla hakkate salvestama. Sõnumiklahvi vajutamisel hakkab vilkuma salvestuse märgutuli (punane), et anda märku salvestuse toimumisest. Kui sõnumi lõpetate, vajutage salvestamise lõpetamiseks ükskõik millist klahvi. Jätkake mõne järgmise sõnumi salvestamisega või salvestage terve tase. Kui olete salvestanud kogu oma sõnumi (või terve taseme või tasemed), siis vajutage salvestusnuppu.




Sõnumi esitamine

Vajutage sõnuminuppu. Roheline taseme märgutuli hakkab vilkuma. Salvestatud sõnum taasesitatakse.

Tasemed

Taseme vahetamiseks vajutage tasemevahetusnuppu, mis paikneb roheline märgutuli all. Hakkab vilkuma roheline märgutuli, mis näitab parajasti aktiivset taset. Muule tasemele lülitamiseks vajutage veel kord sama nuppu. Vahetage paberülekate uuele tasemele vastavaks.

Taseme kustutamiseks vajutage seadme tagaküljel paiknevat salvestusnuppu. Vajutage tasemevahetusnuppu, kuni jõuate tasemeni, mida soovite kustutada. Sisestage pastapliiatsi ots või kirjaklamber seadme tagaküljel asuvasse punktavasse (taseme kustutamine). See kustutab terve taseme. Teiste tasemete kustutamiseks korrake ülaloodud toiminguid. Taseme kustutamine ei kustuta põhisõnavara sõnu ega väljendeid.

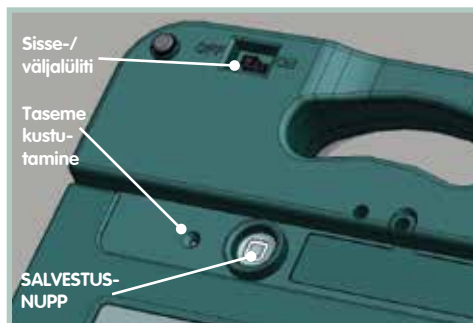

Tagantvaade



Funktsioonilukustus

Hoiab ära nende nuppude soovimatu kasutamise.

- **Tasemelukk** – tasemeluku aktiveerimiseks tehke järgmised toimingud. Hoidke seadme tagaküljel paiknevat salvestusnuppu all. Süttivad punane salvestuse märgutuli ja roheline taseme märgutuli.

Vajutage salvestusnuppu all hoides helitugevuse vähendamise nuppu. Salvestuse märgutuli ja taseme märgutuli kustuvad, näidates, et tasemelukk on SEES.

- **Salvestuse lukk** – salvestuse luku aktiveerimiseks toimige järgmiselt. Vajutage seadme tagaküljel paiknevat salvestusnuppu alla.

Süttivad punane salvestuse märgutuli ja roheline taseme märgutuli. Vajutage salvestusnuppu all hoides helitugevuse suurendamise nuppu. Salvestuse märgutuli ja taseme märgutuli kustuvad, näidates, et salvestuse lukk on SEES.

Salvestuse ja tasemeluku **EEMALDAMISEKS** lülitage seade välja. Hoidke väljalülitatud seadmel salvestusnuppu all ja lülitage seade sisse. Kõigil tasemetel süttib järjest roheline märgutuli, salvestuse märgutuli süttib korra ja kõlab helisignaal.

Põhisõnavara

Viis põhisõnavara sõnumiklahvi

Järgige sõnumi salvestamise juhiseid. Põhisõnavara sõnumid jäävad igal tasemel samaks, kuni te need üle salvestate.



Põhisõnumiklahvide tegelik suurus



Neid viit sõnumit saab igasse olukorda sobivaks kohandada.

Esimene idee



Teine idee



Põhisõnavara tuleks kasutada vestluses sageli kasutatavate sõnumite jaoks. Nende sõnumite hulka võiksid kuuluda tervitused, kommentaarid, tavalised küsimused või põhivajadused. Põhisõnavara sõnumid jäävad tasemest olenemata ühesuguseks.

Ülekatete loomine

GoTalk™-i ülekatetarkvara

GoTalki ülekatetarkvara abil on ülekatete loomine lihtne. See hõlmab üle tuhande foto ja pildi, lisaks saate igale ülekattele kleepida oma pilte. Ülekatte lahtrid võivad sisaldada pilti, teksti (mis tahes keeles) või mõlemat.



Redigeerimisfunktsioonid võimaldavad teil muuta teksti värvust, suurust ja fonti.

Pilte saab teisaldada, pöörata ja karpida.

Kaasas on mallid kõigi GoTalki toodete jaoks. Ülekattefaile saab salvestada ja teiste GoTalki kasutajatega jagada.



Ideed

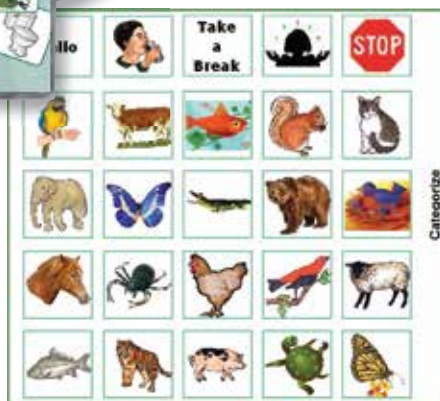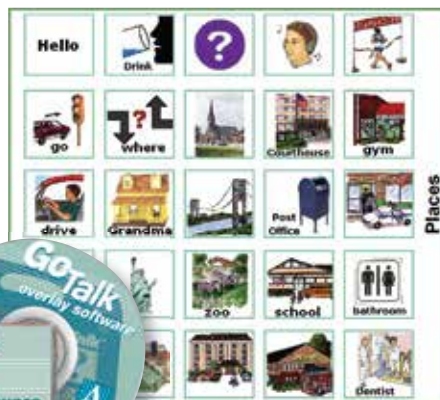


Ülekatted

GoTalk 20+ abil saab ülekatteid teha mitmel viisil.

- Kasutada GoTalk™i ülekatetarkvara.
- Kirjutada sõnad markeriga tühjale ülekattešabloonile.
- Lõigata pildid või sümbolvihjed välja ja kleepida ülekattešabloonile.
- Paigutada igale ruudule takjamaterjal ja lisada nägemispuudega inimestele mõeldud tekstuurvihje.

Ülekatete hoiukoht

Nüüd saate hoida ülekatete hoiukohas iga taseme jaoks vähemalt ühte ülekatet. See kergendab ülekatete vahetamist, kui muutub keskkond või vestlusteema. Pange siia hoiule ka kasutusjuhend.

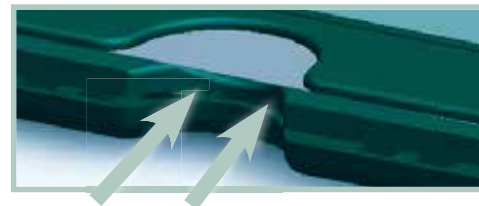

Juurutamised

GoTalk 20+ saab kasutada mitmesuguseks tegevuseks. Pakume mõned võimalused.

- Väljenduslik augmentatiivse kommunikatsiooni seade.
- Modifitseeritud õppekava tegevus.
- Visuaalsete ja kuuldavate keelevihjete pakkumine.
- Juhiste andmine erinevates keskkondades või ülesannete jaoks.
- Kasutamine inglise keele õpetamisel teise keelena.



Attainment Company, Inc.

P.O. Box 930160 504 Commerce Parkway
Verona WI 53593-0160 USA, telefon 1 800 327 4269
RAHVUSVAHELISED KÕNED: 1 608 845 7880

www.AttainmentCompany.com