


medela 

Symphony™

with PersonalFit PLUS breast shield

ET Kasutusjuhend
Kodus kasutamiseks

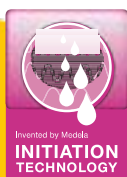

Sisukord

4

1. Kavandatud kasutus/populatsioon/vastunäidustused	5
2. Sümbolite tähendus	6
3. Oluline ohutusteave	8
3.1 Hoiatused	8
4. Toote kirjeldus	12
5. Puhastamine	14
5.1 Voolikud ja Symphony kork	14
5.2 Enne esimest kasutamist/pärast igat kasutuskorda	15
5.3 Enne esimest kasutamist/üks kord päevas	16
5.4 Rinnapump – puhastamine ja desinfitseerimine	17
6. Ettevalmistused pumpamiseks	18
6.1 Kaardi ja juhtme kaitse	18
6.2 Kasutamine võrgutoitel	18
6.3 Programmikaardi vahetamine	19
6.4 Pumbakomplekti kokkupanek	20
7. Väljutamine	24
7.1 Õige programmi valimine	24
7.2 Kaart Symphony Standard: Kasutamine	26
7.3 Seadistage mugav vaakum	27
7.4 Kaart Symphony PLUS: programmi INITIATE kasutamine	28
7.5 Kaart Symphony PLUS: MAINTAIN programmi kasutamine	30
7.6 Väljutamine ühe pumpamisega	32
7.7 Väljutamine topelpumpamisega	34
8. Rinnapiima säilitamine ja sulatamine	36
8.1 Säilitamine	36
8.2 Külmutamine	36
8.3 Sulatamine	36
9. Veaotsing	37
9.1 Veaotsing	37
9.2 Veakoodid	38
10. Garantii ja hooldus/kõrvaldamine	39
11. Terviklik hoolitsus rinnaga toitmise ajaks	41
12. Technical specifications	233

1. Kavandatud kasutus/populatsioon/vastunäidustused

Kasutuseesmärk

Symphony rinnapump on elektriline rinnapump, mis on mõeldud imetavatele emadele rindadest piima väljutamiseks ja kogumiseks.

Kasutusnäidustused

Symphony rinnapump on ette nähtud imetava ema rindadest piima väljutamiseks ja kogumiseks. Samuti on näidustatud emapiimaga toitmise alustamine ja selle toimumine, et toetada rinnapiima andmist imikutele, keda ei saa otse või tõhusalt rinnaga toita (nt probleemid rinna haaramisega (lamedad või sissetõmbunud nibud, suulaelõhe ja enneaegsus)). Rinnapump eemaldab probleemsest rinnast või rindadest piima, et leevendada piimapaisu ja ummistunud piimajuha sümptomeid, samuti toetada valulike või lõhenenud nibude paranemist ja mastiidist paranemise protsessi.

Vastunäidustused

Symphony rinnapumba kasutamisel ei ole teada ühtegi vastunäidustust.

Toote kirjeldus

Õigel viisil rinnapiimaga toitmiseks valmistumiseks ja rinnapiima piisava kogunemise tagamiseks tuleb rinnad tühjendada

- varakult: 1–3 tunni jooksul pärast lapse sündi;
- sageli: iga 2–3 tunni järel;
- tõhusalt: tervisliku imemiskäitumisega beebi või topeltpumpamine.

Soovitav on registreerida pumpamise kuupäev, kellaaeg ja mahud.

Symphony rinnapumbal on programmikaart Symphony PLUS, mis sisaldab kahte pumba imemismustri programmi. Programmi INITIATE eesmärk on toetada rinnapiima tekkimist Medela alustamistehnika abil. Programm MAINTAIN on loodud rinnapiima tekkimise toetamiseks ja alalhoidmiseks 2-etapilise väljutustehnika abil.

Mõnel juhul on Symphony rinnapumbal programmikaart Standard, mis võimaldab luua pumba imemismustreid. See programm on loodud rinnapiima tekkimise toetamiseks ja alalhoidmiseks 2-etapilise väljutustehnika abil. Kuigi kaarti Standard saab kasutada imetamise alustamiseks, soovitab Medela kasutada programmi INITIATE programmikaarti Symphony PLUS.

2-etapiline väljutustehnika jäljendab beebi loomulikku imemisrütmi. Lühikestele stimulatsioonitsüklitele stimulatsioonietapis järgnevad pikemad tsüklid väljutusetapis.

2. Sümbolite tähendus

Hoiatussümbol tähistab kõiki juhiseid, mis on ohutuse seisukohast olulised. Nende juhiste eiramine võib vigastada kasutajat või kahjustada rinnapumpa. Juhend sisaldab mitmeid hoiatussümboleid/sõnaühendeid. Neil on järgmised tähendused:



Hoiatus

Võib tekitada raske vigastuse või surma.



Märkus

Võib põhjustada materiaalselt kahju.



Ettevaatust!

Võib tekitada kergekujulisema vigastuse.



Teave

Kasulik või oluline teave, mis ei ole seotud ohutusega.



See sümbol näitab, et toode on ringlussevõetav.



See sümbol tähistab materjali, millest toode on valmistatud.



See sümbol näitab, et seadet tuleb hoida eemal päikesevalgusest.



See sümbol tähendab, et seade on õrn ja seda tuleb käsitseda ettevaatlikult.



See sümbol tähistab kasutamisele, transpordile ja hoiundamisele kehtivaid temperatuuripiiranguid.



See sümbol tähistab kasutamisele, transpordile ja hoiundamisele kehtivaid niiskuspieranguid.



See sümbol tähistab kasutamisele, transpordile ja hoiundamisele kehtivaid atmosfäärirõhu piiranguid.



See sümbol näitab, et seadet tuleb hoida kuivana.



Näitab, et pakend sisaldab toiduga kokkupuutumiseks ette nähtud tooteid määruse (EÜ) nr 1935/2004 kohaselt.



See sümbol tähistab ainulaadseid GS1 globaalse kaubaartikli numbreid (GTIN).

Seadmel ja pakendil kasutatud sümbolid



See sümbol näitab, et tuleb järgida kasutusjuhiseid.



0123

Näitab vastavust meditsiiniseadmeid käsitlevatele ELi nõuetele.



See sümbol viitab tootjale.



See sümbol näitab, et seadet ei tohi visata sorteerimata olmejäätmete hulka (ainult EL).



See sümbol tähistab vastavust elektrilisi meditsiiniseadmeid käsitlevatele Ameerika Ühendriikide ja Kanada ohutusnõuetele.



See sümbol tähistab BF-tüüpi rakenduslikku komponenti.



See sümbol tähistab seadme tootja seerianumbrit.



See sümbol tähistab seadme tootja katalooginumbrit.

IP21

Tähistab kaitseastet võõrkehade ja niiskuse sissetungi eest.



See sümbol näitab tootmiskuupäeva.



Tähistab seadmeid, mis vastavad II klassi seadmete ohutusnõuetele standardi IEC 61140 kohaselt.



See sümbol tähistab kaitset (kaitsmekarpide või nende asukoha tuvastamiseks).



See sümbol näitab, et kaitsmekarp on läbinud ohutuskatsed.



See sümbol näitab, et pistikupesa kaas tuleb avada.



Tähistab meditsiiniseadet.



Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses/Euroopa Liidus.



Importija.



Sisse-välja nupp



Vabastusnupp



Vaakumi reguleerimise nupp

Seadmel kasutatud sümbolid



Vaakumi taseme indikaator, stimulatsioonietapp – programmikaart Standard ja programmikaart Symphony PLUS (programm MAINTAIN).



Vaakumi taseme indikaator, väljutusetapp – programmikaart Standard ja programmikaart Symphony PLUS (programm MAINTAIN).



Vaakumi taseme indikaator – programmikaart Symphony PLUS (programm INITIATE).

3. Oluline ohutusteave

8

3.1 Hoiatused

Igast Symphony rinnapumbaga seotud ohujuhtumist tuleb teatada Medela AG-le ja asjaomasele pädevale asutusele.



Nende juhiste/ohutusteabe eiramisel ei ole seadme kasutusohutus tagatud.

ENNE KASUTAMIST LUGEGE KÕIKI JUHISEID



HOIATUS! Elektrilöögiohu vähendamiseks:

- I hoidke seade kuivana. Ärge kunagi asetage vette ega teistesse vedelikesse.
- I Ärge pihustage ega valage vedelikku otse pumba sisse.
- I Ärge kasutage, hoidke ega laadige seadet kohtades, kus see võib kukkuda või kus see võidakse tõmmata vanni või kraanikaussi.
- I Ärge kasutage Symphony rinnapumpa vannis või duši all.
- I Ärge võtke kätte ühtegi elektriseadet, kui see on kukkunud vette. Lahutage see viivitamatult toitevõrgust.



HOIATUS! Tulekahju, elektrilöögi või raskete põletuste vältimiseks tehke järgmist.

- I Symphony rinnapump ei ole kuumuskindel. Hoidke seda radiaatoritest ja lahtisest tulest eemal.
- I Ärge laske mootoriplokil puutuda kokku otsese päikesevalgusega.
- I Ärge kasutage Symphony rinnapumpa kohtades, kus kasutatakse aerosoole (aerosoolipihusteid) või hapnikku.
- I Seade ei sobi kasutamiseks kergesti süttiva anesteetilise õhusegu või hapnikuga või lämmastikoksiidi seguga keskkonnas.
- I Ärge sulatage külmutatud rinnapiima mikrolaineahjus ega keeva veega kausis (põletusoht). Mikrolaineahjus kuumutatud piim võib põhjustada beebi suus raskeid põletusi. Mikrolaineahi võib ka muuta rinnapiima koostist.
- I Kasutage ainult Symphony rinnapumbaga tarnitud toitejuhet. Veenduge, et selle nimipinge vastaks võrgupingele.
- I Ärge kunagi kasutage elektriseadet, kui selle juhe või pistik on kahjustatud, kui seade ei tööta nõuetekohaselt või kui see on maha või vette kukkunud.

- I Enne kasutamist kontrollige alati toitekaabli juhtmetel kahjustusi või paljastunud kohti. Kui leiate kahjustusi, lõpetage kohe toitejuhtme kasutamine. Võtke ühendust Medela kohaliku esindaja või rendifirmaga.
- I Rinnapumpa ei tohi kunagi jätta järelevalveta, kui see on toiteallikaga ühendatud.
- I Toite lahutamine on tagatud ainult toitejuhtme seinapistikupesast lahtiühendamise korral.
- I Asetage pump nii, et toitejuhet oleks lihtne pistikupesast eemaldada.
- I Hoidke juhe eemal kuumadest pindadest.



HOIATUS! Terviseriskide vältimiseks ja vigastusohu vähendamiseks järgige alljärgnevaid juhiseid.

- I Enne esmakordset kasutamist puhastage kõik korduskasutatavad osad, mis puutuvad kokku rinna ja rinnapiimaga, nagu on kirjeldatud 5. jaotises.
- I Puhastage rinna ja rinnapiimaga kokkupuutuvad osad kohe pärast kasutamist.
- I Pumbakomplektid on isiklikud hooldusvahendid, mis on mõeldud ainult ühele kasutajale. Neid ei tohiks emade vahel jagada.
- I Ärge jätkake pumpamist üle kahe järjestikuse pumpamiskorra, juhul kui tulemusi ei saavutata.
- I Probleemide või valu ilmnemisel konsulteerige imetamisspetsialistiga.
- I Ärge kunagi kasutage pumpa raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui arst on selle välja kirjutanud/seda soovitanud, sest pumpamine võib esile kutsuda sünnituse.
- I Emad, kes on nakatunud B-, C-hepatiidi või inimese immuunpuudulikkuse viirusega (HIV): rinnapiima pumpamine ei vähenda ega kõrvalda rinnapiima kaudu viiruse lapsele kandumise riski.
- I Kontrollige enne iga kasutamist kõiki Symphony rinnapumba komponente ja kõiki pumbakomplekti(de) osi.
- I Ärge kunagi kasutage kahjustatud seadet, komponente ega osi.
- I Ärge kunagi kasutage seadet, komponente ega osi, kui nendel on näha mustust, hallitust või muid saasteaineid.
- I Vahetage hallitanud, kahjustatud või kulunud osad välja.
- I Symphony pumba sees ei ole kasutaja hooldatavaid osi. Parandustöid tohib teha ainult volitatud klienditeenindus. Ärge proovige osasid ise parandada! Ükski seadme modifikatsioon ei ole lubatud.
- I Kasutage Symphony rinnapumpa ainult kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbel.

3. Oluline ohutusteave

10



HOIATUS! Terviseriskide vältimiseks ja vigastusohu vähendamiseks järgige alljärgnevaid juhiseid.

- I Kasutage ainult Medela originaaltarvikuid.
- I Ärge kasutage tarvikuid, mida Medela ei soovita, kuna see võib põhjustada ohte.
- I Ärge muutke pumba ega pumbakomplekti osi.
- I Ärge kasutage Symphony rinnapumpa autoga sõitmise ajal.
- I Ärge sõitke, kui kasutate vabakäepumpamist.
- I Ärge kunagi laske ega sisestage esemeid seadme avadesse ega voolikutesse.
- I Ärge kasutage pumpa välistingimustes.
- I Kui Symphony rinnapumpa kasutatakse laste läheduses, on vajalik järelevalve.
- I Ärge jätke pakendit ega toote osasid järelevalveta. Hoidke neid lastele kättesaamatus kohas.
- I Symphony rinnapumba elektromagnetilist ühilduvust on kontrollitud ning see vastab standardi IEC 60601-1-2:2007 3. versiooni ja standardi IEC 60601-1-2:2014 4. versiooni nõuetele ning alapunktidele 7 ja 8.9.
- I Raadiosageduslikud sideseadmed, näiteks traadita koduvõrguseadmed, mobiiltelefonid, juhtmeta telefonid ja nende tugijaamad, samuti raadiosaatjad, võivad mõjutada Symphony rinnapumba tööd. Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) tõttu on Symphony rinnapumba ja juhtmevaba seadme soovitatav vahekaugus vähemalt 30 cm.
- I Symphony elektrilist rinnapumba ei tohi kasutada ega virnastada koos teiste seadmetega. Kui külgnev või üksteise otsa asetatuna kasutamine on vajalik, siis jälgige, et Symphony rinnapump töötaks tavakasutamiseks ettenähtud konfiguratsioonis.

Tähtis teave

- I Plastpudelid ja nende osad muutuvad külmununa hapraks ning võivad mahakukkumisel puruneda.
- I Samuti võivad pudelid ja nende osad kahjustuda ebaõigel kasutamisel (näiteks kukkumisel), liiga tugevasti kinni keeramisel või ümberminemisel.
- I Olge pudelite ja komponentide kasutamisel hoolikas.
- I Ärge kasutage rinnapiima, kui pudelid või komponendid saavad kahjustada.



Allolevate juhiste/ohutusnõuete eiramine võib tekitada kergeid vigastusi.

! ETTEVAATUST! Saastumisohu vältimiseks

- I Enne rinnapumba, pumbakomplekti(de) ja rindade puudutamist peske käed põhjalikult seebi ja veega. Vältige mahutite või kaante sisemuse puudutamist.
- I Kasutage puhastamiseks üksnes joomiskõlblikku kraani- või pudelivett.
- I Ärge hoiustage märgi või niiskeid osi, sest nii võib tekkida hallitus.

! ETTEVAATUST! Terviseriskide vältimiseks ja vigastusohu vähendamiseks järgige alljärgnevaid juhiseid.

- I Pumpamisel peab rinnapump olema püstiasendis.
- I Ärge kasutage Symphony rinnapumpa, kui magate või olete liiga unine.
- I Lehtrite liiga tugev surumine rindadele võib mõjutada piima voolu.
- I Ärge püüdke väljutada suure vaakumi ja ebamugavust põhjustava tugevusega. Valu koos võimaliku rinna- ja nibutraumaga võib vähendada piima kogust.
- I Ärge proovige eemaldada rinnalehtriti rinnalt pumpamise ajal. Lülitage rinnapump välja ja rebige sõrmega lahti rinna ja rinnalehtri vaheline tihend, seejärel eemaldage rinnalehter rinnalt.
- I Kui pumpamine on ebamugav või põhjustab valu, siis lülitage seade välja, rebige sõrmega lahti rinna ja rinnalehtri vaheline tihend ning võtke rinnalehter rinna pealt ära.
- I Ärge lühendage rinnakaitse ja pumba vahelisi voolikuid.
- I Ärge kasutage rinnapumba, pumbaosade või - komplekti osade puhastamisel abrasiivseid nõude-/pesuvahendeid.
- I Ärge kunagi pange rinnapumpa vette, kuna see võib rinnapumpa püsivalt kahjustada.
- I Ärge kasutage Medela Symphony pumbakomplekte mitteühilduva rinnapumbaga.
- I Ärge kasutage Medela Symphony rinnapumpa koos mitteühilduvate pumbakomplektidega.
- I Ärge kasutage pumbakomplekte muuks otstarbeks kui rinnapiima väljutamiseks.

! ETTEVAATUST! Elektrilöögiohu vähendamiseks

- I Ühendage toitejuhe esmalt rinnapumbaga ja seejärel pistikupessa.
- I Enne rinnapumba puhastamist lahutage see vooluvõrgust.

4. Toote kirjeldus

12


Symphony üksik- või topeltpumba komplekt (rakenduslikud komponendid)*

Symphony üksik- või topeltpumba komplekt on Symphony rinnapumba lisavarustus. Pumbakomplekti tohib kasutada ainult üks ema; kasutamine rohkem kui ühel emal võib olla tervisele ohtlik. Üksikpumba komplekt sisaldab ühte detaili igast osast, topeltpumba komplekt aga kahte.


Pumbakomplekt sisaldab rinnakaitset PersonalFit PLUS suurusega S (21 mm), M (24 mm) või L (27 mm). Teiste rinnalehtri suuruste kohta leiate teavet jaotisest 11. Lisateavet rinnalehtri õige suuruse kohta leiate pumbakomplekti pakendi brošüürist.

rinnalehter

PersonalFit PLUS

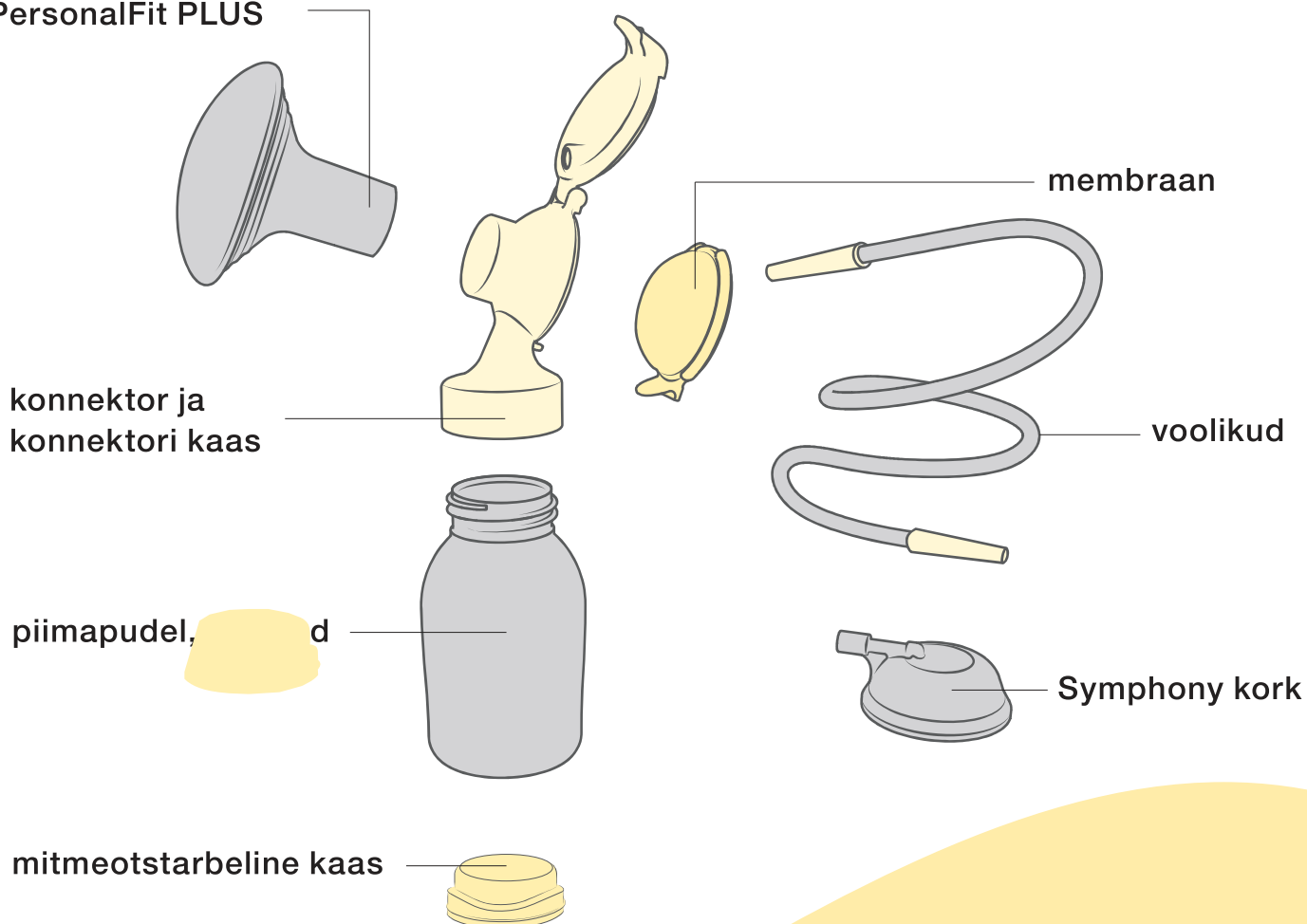

Vajalik rendipump: Symphony rinnapump

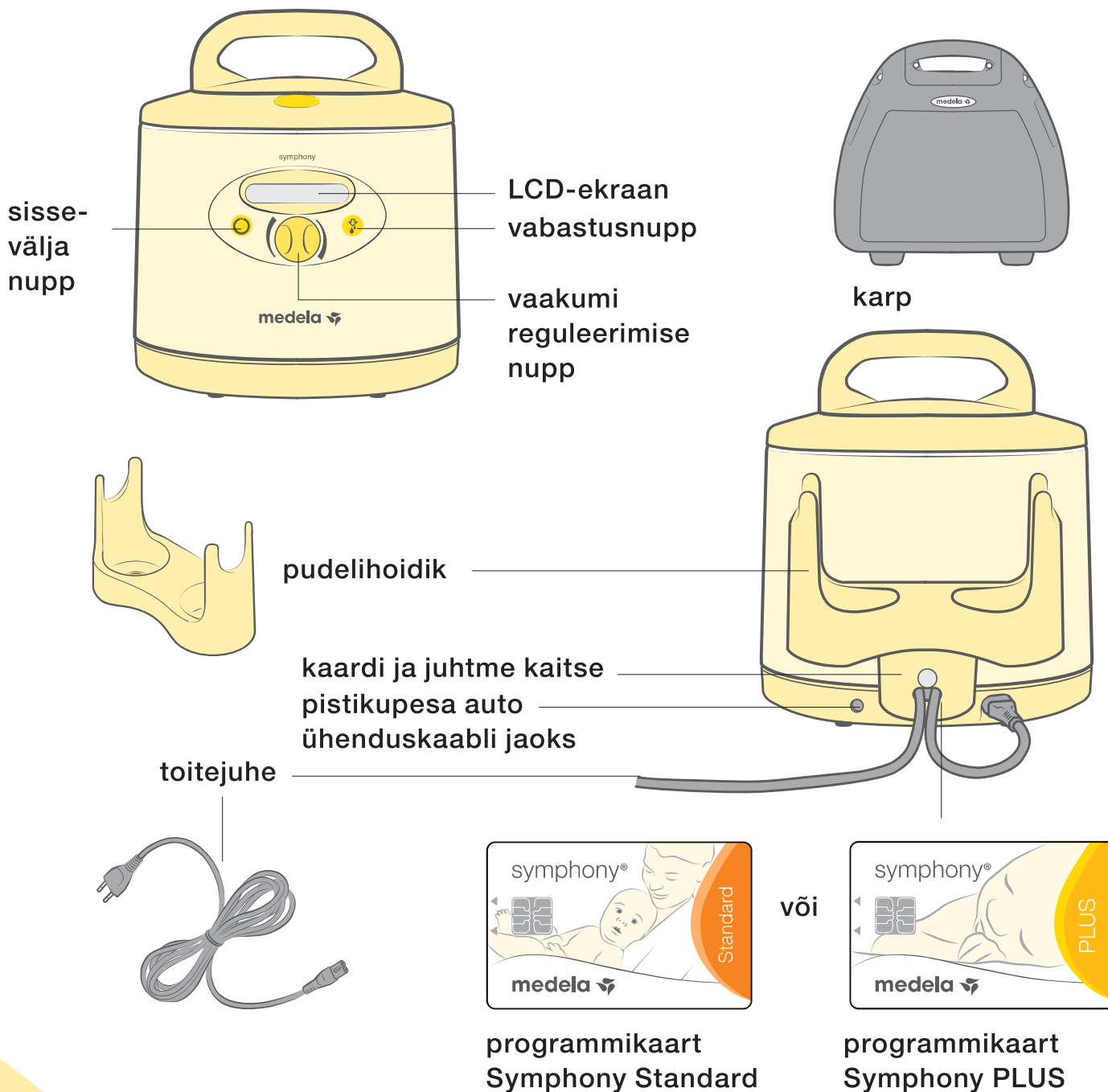

* Tellimiseks saadavalolevate varuosade ja lisatarvikute loend on toodud jaotises 11. Artiklid ei pruugi kõigis riikides saadaval olla. Medela toodete kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.medela.com ja leidke asukohaotsijad.

5. Puhastamine

14



Ettevaatust!

- I Kasutage puhastamiseks üksnes joomiskõlblikku vett.
- I Võtke pumbakomplekt lahti ning peske kohe pärast kasutamist kõiki osi, mis puutuvad kokku rinna ja rinnapiimaga, et vältida piimajääkide kuivamist ning bakterite kasvu.




Märkus

- I Enne pumbakomplekti esmakordset kasutamist peate selle põhjalikult puhastama. Tehke jaotises 5.2 ja 5.3 kirjeldatud toimingud.
- I Pumbakomplekt ei vaja mingit hooldust.
- I Olge ettevaatlik, et vältida pumbakomplekti osade kahjustamist nende puhastamisel.
- I Kui puhastate pumbakomplekti üksikosi nõudepesumasinas, võivad toidupigmendid pumbaosade värvust muuta. See ei mõjuta nende toimimist.
- I Membraan takistab piima voolamist voolikutesse, kuid pärast iga pumpamiskorda kontrollige siiski voolikuid ja Symphony korki, et poleks nähtavaid jääke. Kui voolikus on nähtavaid piimajääke, järgige jaotises 5.1 toodud juhiseid.

5.1 Voolikud ja Symphony kork

1

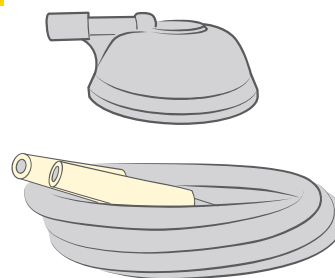

I Nähtavaid piimajääke pole

Puhastamine pole vajalik.

I Nähtavad piimajäägid


Puhastage voolikud ja kork, nagu on kirjeldatud jaotise 5.2 punktis 2a.

Seejärel desinfitseerige, keetes osasid vees vähemalt 5 minutit.

Kuivatage kork, nagu on kirjeldatud jaotise 5.2 punktis 3.

Raputage veetilgad voolikust välja ja laske pumbal koos voolikuga töötada, kuni see on kuiv.

5.2 Enne esimest kasutamist/pärast igat kasutuskorda

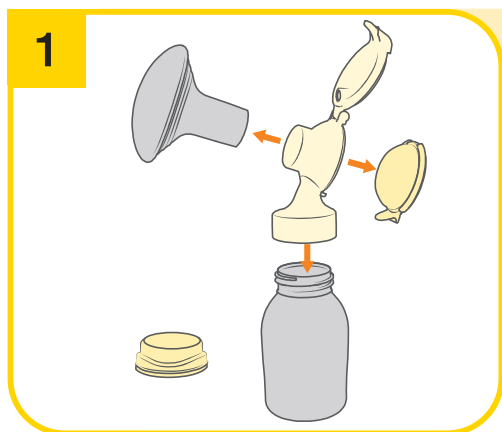


Võtke pumbakomplekt üksikosadeks lahti.

- pudel
- mitmeotstarbeline kaas
- rinnalehter
- konnektor ja konnektori kaas
- membraan

Kontrollige kõiki osi, et poleks kahjustusi.

Vahetage kahjustunud või kulunud osad välja.

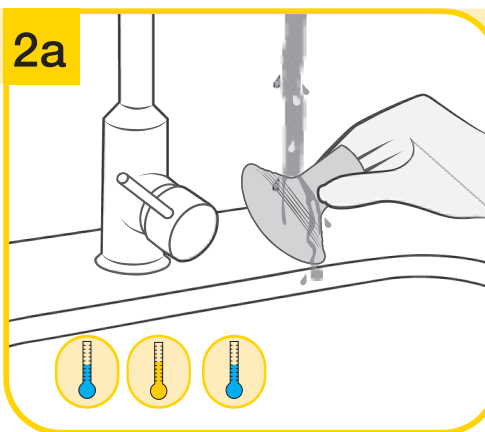

- I Loputage kõiki osi jaheda ja puhta veega (ligikaudsel temperatuuril 20 °C).
- I Puhastage osi rohke sooja seebiveega (ligikaudsel temperatuuril 30 °C). Kasutage kaubanduses saadaolevat pesuvedelikku, eelistatavalt ilma kunstlike lõhna- ja värvaineteta (neutraalne pH).
- I Loputage kõiki osi jaheda ja puhta joomiskõlbliku veega (ligikaudsel temperatuuril 20 °C).

2b Nõudepesumasin

Eelmise etapi 2a alternatiivina võite pumbakomplekti puhastada ka nõudepesumasinas. Asetage osad ülemisele riiulile või söögiriistade sektsiooni. Kasutage kaubanduses müügil olevat nõudepesuvahendit.

3 Kuivatamine/hoiustamine

Kuivatage puhta lapiga või jätke puhtale lapile kuivama. Pange puhtad osad puhtasse säilituskotti või puhtasse keskkonda. Ärge hoidke osasid õhukindlas konteineris/kotis. On oluline, et kogu jääniiskus kuivaks ära.

5. Puhastamine

16



Ettevaatust!

- I Ärge pihustage ega valage vedelikku otse pumba sisse.
- I Kasutage puhastamiseks üksnes joomiskõlblikku vett.
- I Võtke pumbakomplekt lahti ning peske kohe pärast kasutamist kõiki osi, mis puutuvad kokku rinna ja rinnapiimaga, et vältida piimajääkide kuivamist ning bakterite kasvu.
- I **Jaotis 5.4. Rinnapump – Puhastamine ja desinfitseerimine:**
Enne rinnapumba puhastamist lahutage see vooluvõrgust.




Märkus

- I **Jaotis 5.3, etapp 2:**
keetmisel võite lisada teelusikatäie sidrunhapet, et vältida lubjasette kogunemist.

5.3 Enne esimest kasutamist/ üks kord päevas

1

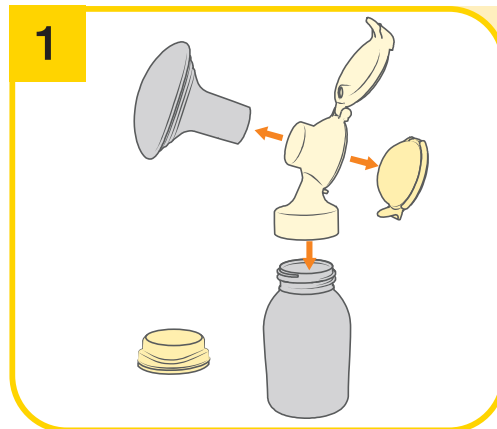


Võtke pumbakomplekt üksikosadeks lahti.

- pudel
- mitmeotstarbeline kaas
- rinnalehter
- konnektor ja konnektori kaas
- membraan

Kontrollige kõiki osi, et poleks kahjustusi. Vahetage kahjustunud või kulunud osad välja.

2

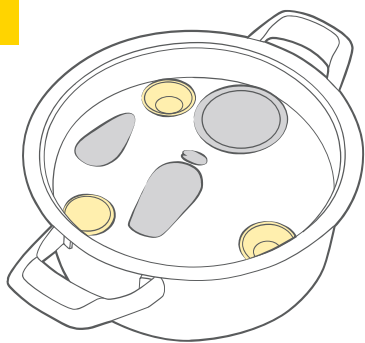

Veenduge, et kõik osad oleks veega kaetud ja keetke vähemalt viis minutit.

3

Kuivatamine/hoiustamine

Kuivatage puhta lapiga või jätke puhtale lapile kuivama. Pange puhtad osad puhtasse säilituskotti või puhtasse keskkonda. Ärge hoidke osasid õhukindlas kontaineris/kotis. On oluline, et kogu jääniiskus kuivaks ära.

5.4 Rinnapump – puhastamine ja desinfitseerimine


Puhastage ja desinfitseerige pump vajaduse korral.

1



Rinnapumba **puhastamiseks** pühkige korpust puhta niiske (mitte märja) lapiga. Võite kasutada joomiskõlblikku vett ja tavalist pesuvahendit või mittesöövitavat puhastusvahendit.

2

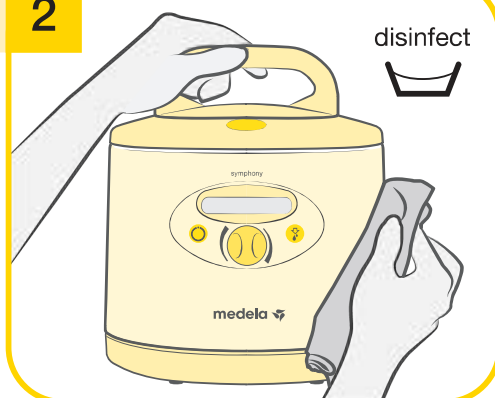

Rinnapumba **desinfitseerimiseks** pühkige pumba korpust puhta niiske (mitte märja) lapiga. Peale selle võite kasutada alkoholipõhist desinfitseerimisvahendit.

6. Ettevalmistused pumpamiseks

18



Hoiatus

Jaotis 6.2. Vooluvõrgu toide:

- I Kasutage ainult Symphony rinnapumbaga tarnitud toitejuhet.
- I Kontrollige, kas toiteadapteri pinge vastab võrgupingele.



Teave

- I Kasutage pumpa ainult sobiva programmikaardiga (Symphony Standard või Symphony PLUS).

Valikuline akuga pumba jaoks

- I Sisseehitatud akut tuleb pärast seadme kättesaamist laadida 12 tundi.
- I Pumba saab laadimise ajal kasutada.
- I Kui pumba ei kasutata pikka aega, laadige akut iga kahe kuu tagant (iga kord 12 tundi).
- I Aku optimaalne kasutusiga on tagatud, kui see pole regulaarselt täielikult tühjenenud või kui pumba laetakse ajal, kui seda ei kasutata.

Pumpamisaeg
(täislaetud aku)


u 60 min.

Laadimisaeg
(täislaadimiseks)

12 tundi

6.1 Kaardi ja juhtme kaitse


1

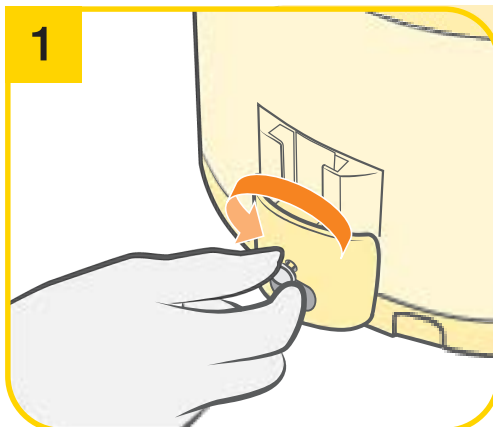

Eemaldamiseks keerake kaart ja juhtmekaitse lahti ning lükake juhtrööpast välja.


6.2 Kasutamine võrgutoitel

1

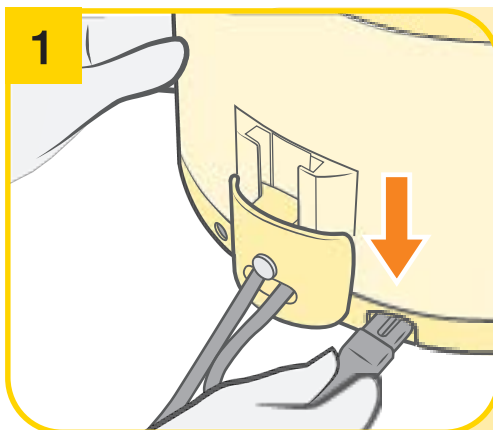


Sisestage toitejuhe pumba tagaküljel asuvasse pistikupessa.

2

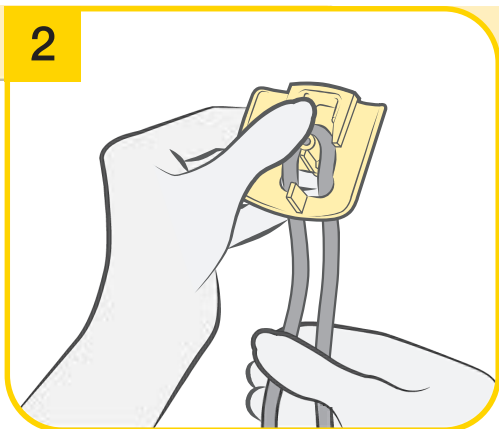

Sisestage juhe kaarti ja juhtmekaitse varrast ümbritsevasse silmusesse.
 → Veenduge, et juhtme ühendamiseks vajalik lõtk oleks piisav.


3

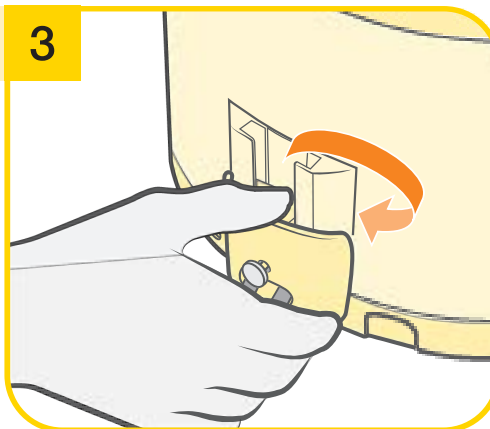

Lükake kaarti ja juhtmekaitset üle tagaküljel asuva juhtrööpa kuni nende peatumiseni. Keerake kruvi kinni.


6.3 Programmikaardi vahetamine

2

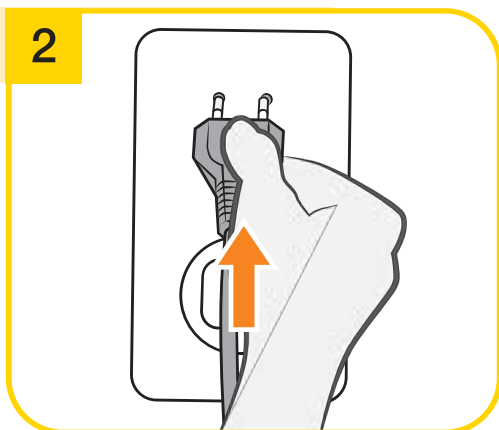

Ühendage toitepistik pistikupesasse.

1

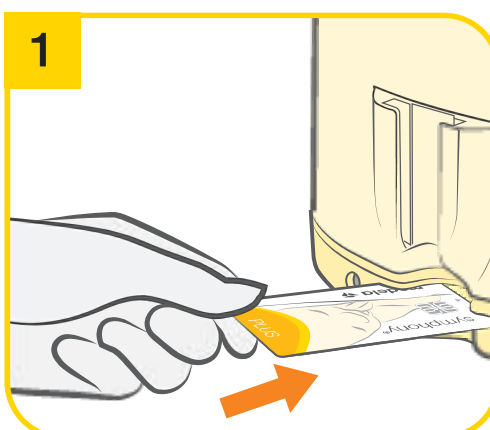

Niipea, kui kaardisahtel on vabastatud (etapp 1 jaotises 6.1), saab kaardi eemaldada ja asendada või vahetada.

6. Ettevalmistused pumpamiseks

20



Ettevaatust!

- I Peske enne rinna, pumbaosade ja pumba puudutamist käsi korralikult seebi ja veega (vähemalt ühe minuti vältel). Kuivatage käed puhta rätiku või paberrätikuga.



Märkus

- I Kasutage üksnes Medela originaaltarvikuid.
- I Veenduge enne kasutamist, et pumbakomplekti osad ei oleks kulunud ega kahjustatud. Vahetage kahjustunud või kulunud osad välja.
- I Kõik osad peavad olema enne kasutamist täiesti kuivad.




Teave

- I Olge kõigi punktide järgimisel hoolikas ja pange pumbakomplekt õigesti kokku. Muidu ei pruugi hea vaakumi saavutamine võimalik olla.


6.4 Pumbakomplekti kokkupanek

1

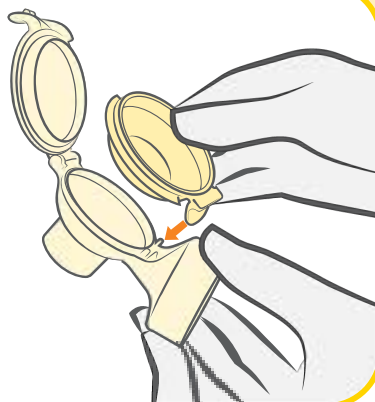


Asetage membraan ettevaatlikult konnektoris, nii et klapp jääks konnektori avausse. Veenduge, et membraan jääks tihedalt ümber konnektori serva.

4

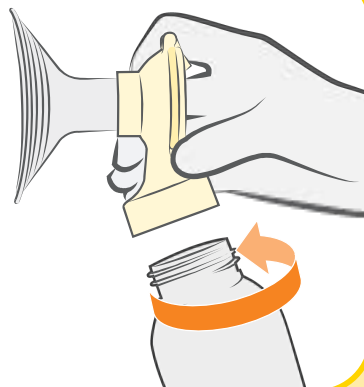


Keerake konnektor pudeli külge. Valige oma vajadustele vastav pudeli suurus.

2

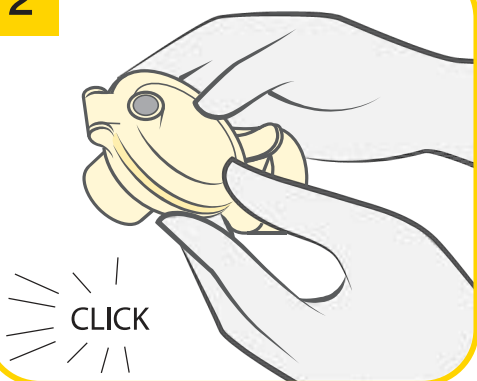


Sulgege konnektori kaas nii, et kuuleksite sulgumise klõpsatust.

3

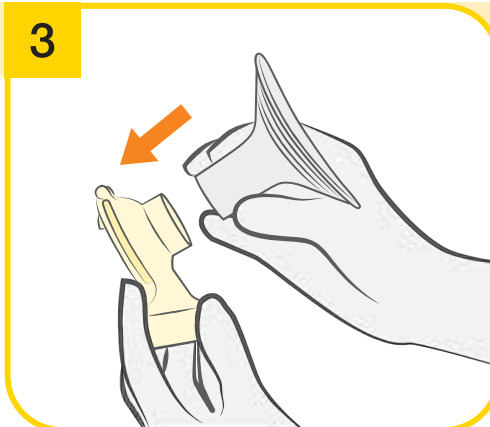


Lükake rinnalehter ettevaatlikult konnektorile. Valige vajadustele vastava suurusega lehter.

5

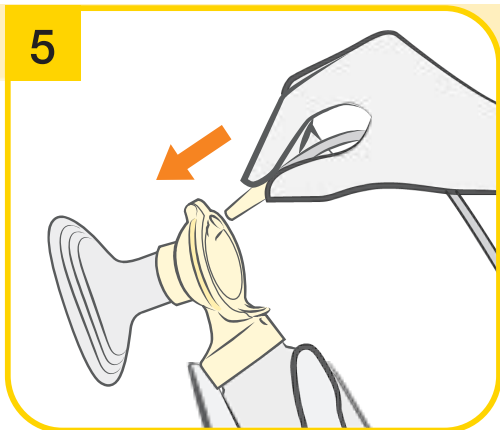

Sisestage voolikuadapter konnektori kaane vastavasse avasse.

6

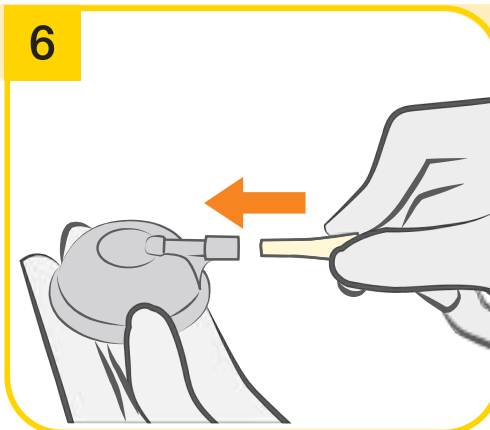

Sisestage voolikuadapter Symphony korgi avasse.

6. Ettevalmistused pumpamiseks


22

i

Teave


- I Pumpamisel sulgege alati kaas. Kaas hoiab Symphony korki allasurutuna, et vältida vaakumi kadu, mis võib tekkida Symphony korki eemaldumisel.

7

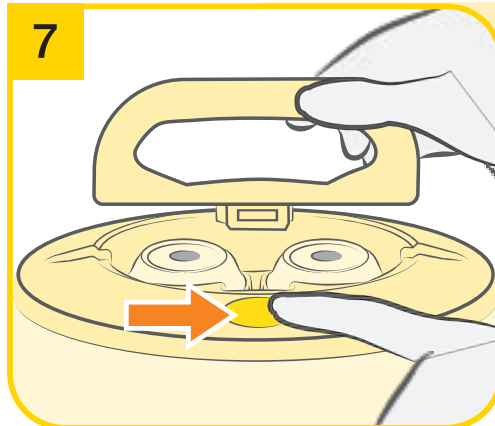


Avage rinnapumba kaas. Vajutage ovaalset nuppu Symphony pumba ülaosas ja tõstke käepide üles.

10

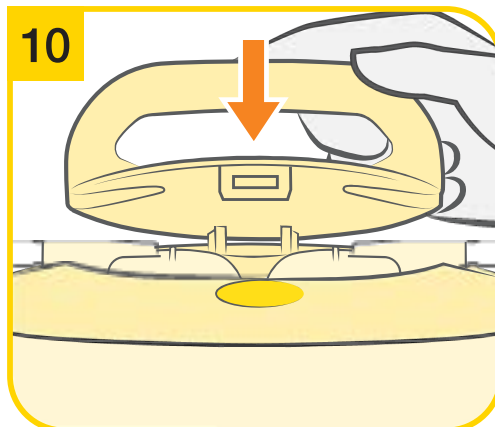


Sulgege kaas.

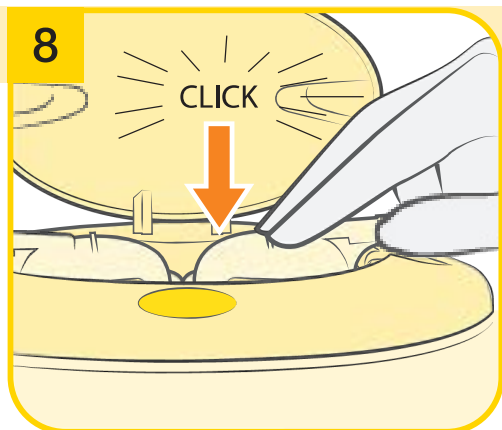

Asetage Symphony kork kindlalt rinnapumba membraanile, et moodustada tihend.

→ Veenduge, et Symphony kork haakuks ja oleks pinnaga samal tasemel.

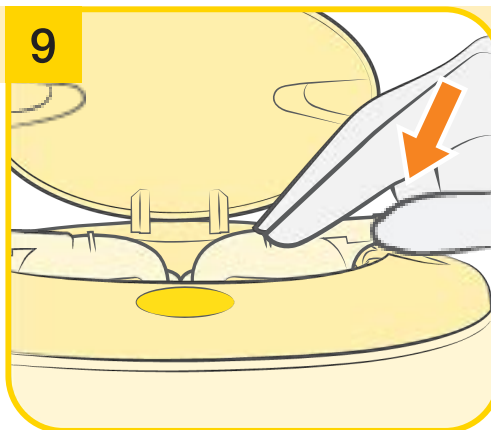

Pange voolikuliitmik pumba korpuse süvendi keskele.

7. Väljutamine

24

7.1 Õige programmi valimine

Symphony rinnapump on paigaldatud kas programmikaardiga Symphony PLUS või Symphony Standard, mis genereerivad pumba imemismustreid.


Programmikaart Symphony PLUS sisaldab kahte pumbaprogrammi. Programmi INITIATE eesmärk on käivitada piima tekkimine Medela alustamistehnika abil. Programm MAINTAIN on loodud rinnapiima tekkimise toetamiseks ja alalhoidmiseks 2-etapilise väljutustehnika abil.

Programmikaart Standard on loodud piima tekkimise ja säilitamise toetamiseks 2-etapilise väljutustehnika abil. See programm on identne programmiga MAINTAIN. Kuigi kaarti Standard saab kasutada imetamise alustamiseks, soovitab Medela kasutada programmi INITIATE programmikaarti Symphony PLUS.

Võtke ühendust ämmaemanda või imetamisspetsialistiga, kui teil on raskusi imetamise alustamisega või kui vajate lisateavet programmide kohta.


Milline programmikaart on paigaldatud?

Paigaldatud programmikaardi määramiseks eemaldage programmikaart jaotise 6.3 kohaselt. Seejärel sisestage kaart uuesti.

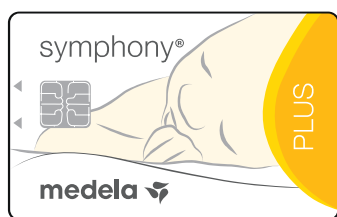

programmikaart
Symphony PLUS

või

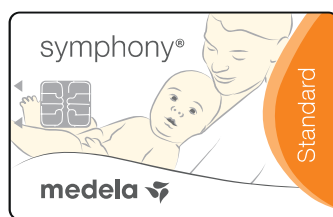

programmikaart
Symphony Standard

Kui on paigaldatud kaart Symphony Standard

Te ei pea pumpamisprogrammi valima. Kaart sisaldab 2-etapilise väljutuse tehnikat ja algab stimulatsioonietapiga. Lisateavet vt jaotisest 7.2.

Kui on paigaldatud kaart Symphony PLUS

Kuni piima sekretoorse aktivatsiooni (piim tuleb rinda) või kuni 5 päeva:

Kasutage programmi INITIATE alates sünnist kuni sekretoorse aktivatsiooni, mida näitab üks järgmistest.

- Ühe pumpamiskorra ajal **mõlema rinna peale kokku 20 ml või suurema koguse pumpamine.**

VÕI

- Füsioloogilised markerid, nt **rindade täituvus.**

Kui 5 päeva möödudes sekretoorset aktivatsiooni pole toimunud, minge üle programmile MAINTAIN.

Pärast sekretoorset aktivatsiooni (piim tuleb rinda) või alates 6. päevast:

Kasutage programmi MAINTAIN pärast piima rinda tulemist, millest annab märku järgnev:

- Ühe pumpamiskorra ajal **mõlema rinna peale kokku 20 ml või suurema koguse pumpamine.**

VÕI

- Füsioloogilised markerid, nt **rindade täituvus.**

VÕI

- Alates 6. päevast, olenevalt sellest, kumb avaldub varem.

7. Väljutamine

26


! Märkus

- I Lahutage Symphony rinnapump pärast piima väljutamist alati toiteallika küljest.


i Teave

- I Programm salvestab viimase vaakumiseadistuse stimulatsioonietapis.
- I **Standardprogramm:** vajutage vabastusnuppu , et naasta vajaduse korral väljutusetapilt stimulatsioonietappi. Kui piim ei ole pärast kahte järjestikust stimulatsioonietappi voolama hakanud, tehke paus ja proovige 15–30 minuti pärast uuesti. Samuti võite väljutusetapis proovida rindade massaaži ja seejärel pumbata.
- I Symphony lülitub automaatselt välja, kui pump on töötanud 30 minutit, ilma et kasutaja oleks teinud mis tahes toiminguid (nt vaakumi reguleerimine).


7.2 Kaart Symphony Standard: Kasutamine

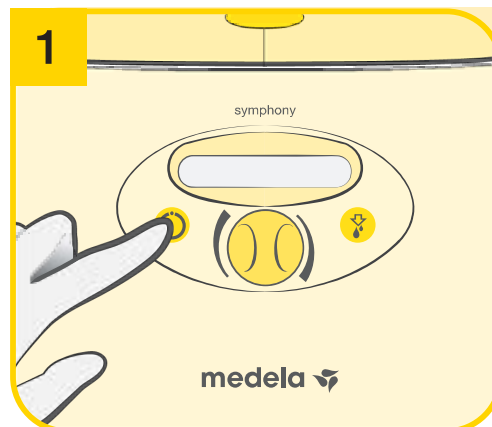


Rinnapumba sisselülitamiseks vajutage sisse-välja nuppu . Programm Standard alustab pärast sisse-välja nupu vajutamist automaatselt stimulatsioonietappi.

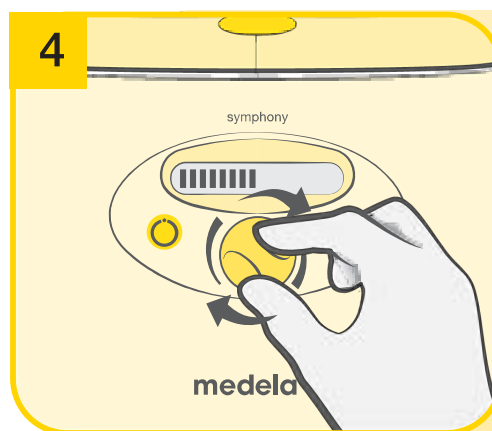

Seadke mugav vaakumi tase väljutusetapi jaoks (vt jaotis 7.3). Ekraanil olevad ribad näitavad vaakumi taset. Mida rohkem ribasid, seda tugevam on vaakum.

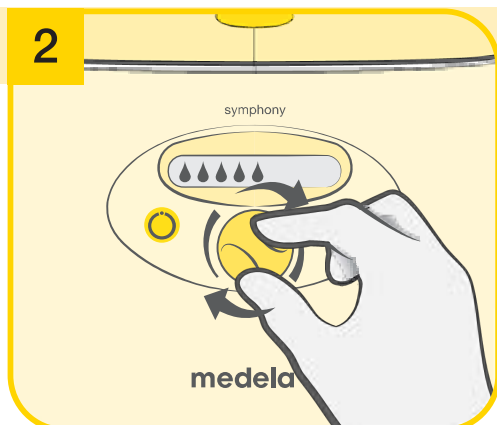


Seadistage stimulatsioonietapi jaoks mugav vaakumi tase (vt jaotist 7.3). Ekraanil olevad tilgad näitavad vaakumi taset. Mida rohkem tilkasid, seda tugevam on vaakum.

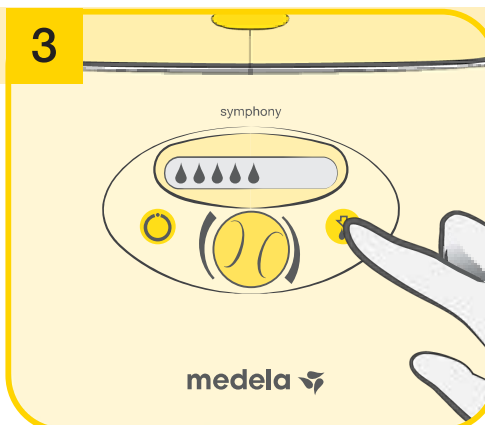


Pump lülitub kahe minuti pärast automaatselt väljutusetappi.
→ Kui piim hakkab kiiremini voolama, vajutage vabastusnuppu , et lülituda ümber väljutusetapile.

7.3 Seadistage mugav vaakum

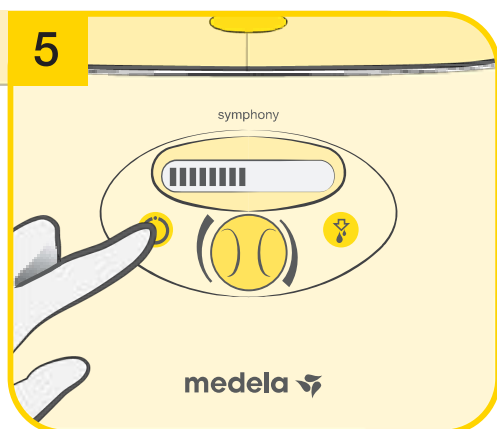

Jätkake pumpamist, kuni rinnad on hästi tühjenenud ja üleni pehmed (Medela soovib vähemalt 15-minutilist pumpamisaega). Lülitage pump välja, vajutades sisse-välja nuppu .

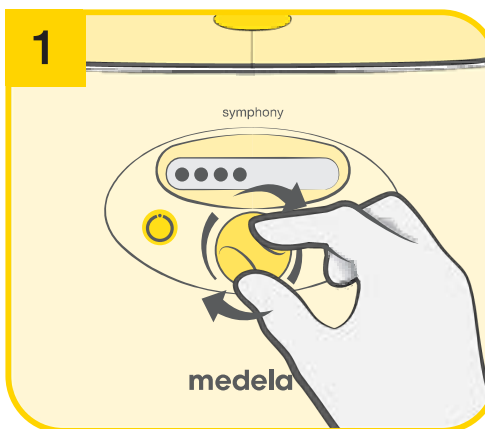

Seadke vaakum mugavale tasemele, keerates vaakumi reguleerimise nuppu. Vaakumi suurendamiseks keerake nuppu esmalt paremale, kuni tunnete kerget ebamugavust. Seejärel keerake vaakumi vähendamiseks nuppu vasakule kuni mugavustunde saavutamiseni.

7. Väljutamine

28



Märkus


- I Kuni piima sekretoorse aktivatsioonini (piim tuleb rinda) või kuni 5 päeva: Kasutage programmi INITIATE alates sünnist kuni sekretoorse aktivatsioonini, mida näitab üks järgmistest.
 - Ühe pumpamiskorra ajal mõlema rinna peale kokku 20 ml või suurema koguse pumpamine.VÕI
 - Füsioloogilised markerid, nt rindade täituvus. Kui 5 päeva möödudes sekretoorset aktivatsiooni pole toimunud, minge üle programmile MAINTAIN. (vt jaotist 7.5).- I Lahutage Symphony rinnapump pärast piima väljutamist alati toiteallika küljest.




Teave

- I INITIATE programm töötab automaatselt 15 minutit. Oluline on läbida kogu INITIATE programm. Pump lülitub automaatselt välja.

7.4 Kaart Symphony PLUS: programmi INITIATE kasutamine

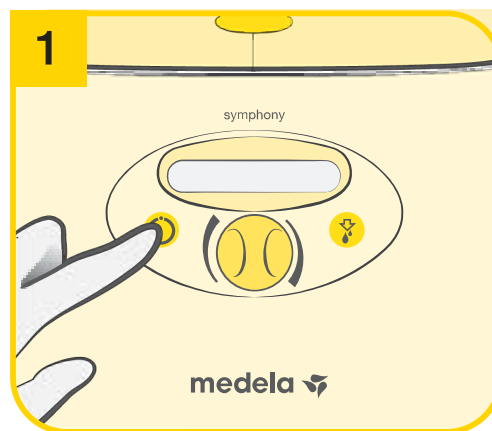


Rinnapumba sisselülitamiseks vajutage sisse-välja nuppu . Ekraanil kuvatakse tekst “INITIATE press ”.

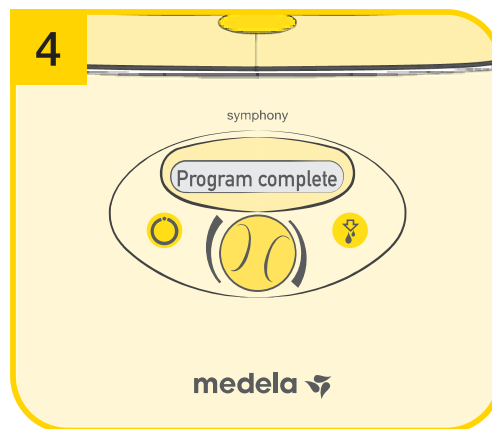


INITIATE programm töötab automaatselt 15 minutit koos stimulatsiooni-, väljutus- ja pausietappidega. Programmi lõppu tähistab helisignaali. Ekraanil kuvatakse tekst “Programm läbitud”. Pump lülitub automaatselt välja.

→ Oluline on läbida kogu INITIATE programm.

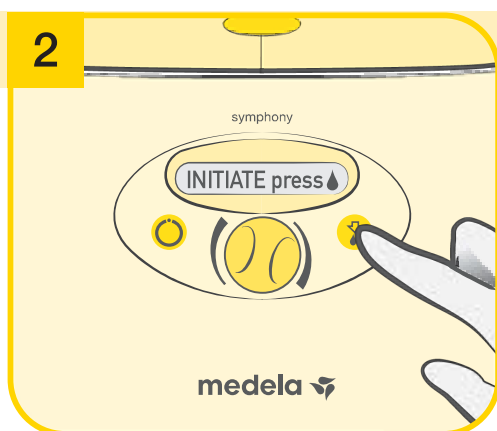

Vajutage 10 sekundi jooksul vabastusnuppu . Ekraanil kuvatakse tekst "INITIATE running".

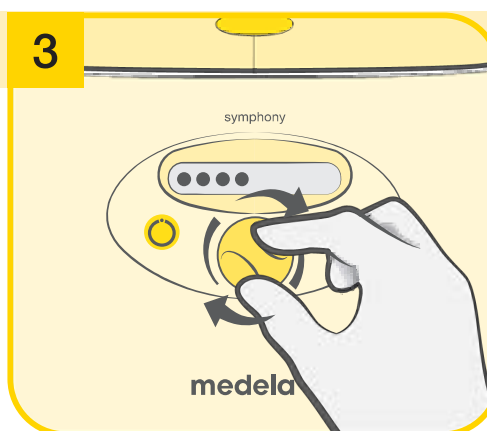

Seadke mugav vaakum (vt jaotist 7.3). Ekraanil olevad täpid näitavad vaakumi taset. Mida rohkem täppe, seda tugevam on vaakum.

7. Väljutamine

30



Märkus


- I Pärast sekretoorset aktivatsiooni (piim tuleb rinda) või alates 6. päevast: Kasutage programmi MAINTAIN pärast piima rinda tulemist, millest annab märku järgnev:
 - Ühe pumpamiskorra ajal mõlema rinna peale kokku 20 ml või suurema koguse pumpamine.VÕI
 - Füsioloogilised markerid, nt rindade täituvus.VÕI
 - Alates 6. päevast, olenevalt sellest, kumb avaldub varem.- I Lahutage Symphony rinnapump pärast piima väljutamist alati toiteallika küljest.




Teave

- I Programm salvestab viimase vaakumiseadistuse stimulatsioonietapis.
- I **MAINTAIN programmi puhul:** vajutage vabastusnuppu , et naasta vajaduse korral väljutusetapilt stimulatsioonietappi. Kui piim ei ole pärast kahte järjestikust stimulatsioonietappi voolama hakanud, tehke paus ja proovige 15–30 minuti pärast uuesti. Samuti võite väljutusetapis proovida rindade massaaži ja seejärel pumbata.
- I Symphony lülitub automaatselt välja, kui pump on töötanud 30 minutit, ilma et kasutaja oleks teinud mis tahes toiminguid (nt vaakumi reguleerimine).


7.5 Kaart Symphony PLUS: MAINTAIN programmi kasutamine

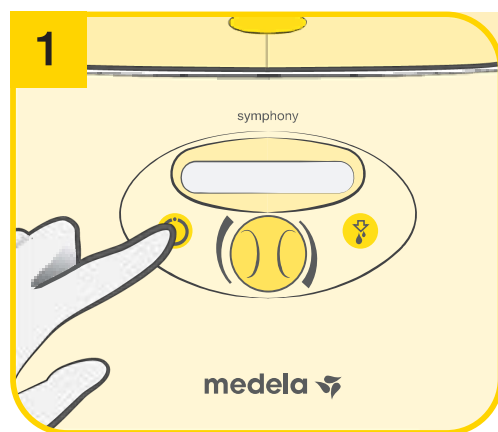


Rinnapumba sisselülitamiseks vajutage sisse-väljanuppu . MAINTAIN programm alustab pärast sisse-välja nupu vajutamist automaatselt stimulatsioonietappi.

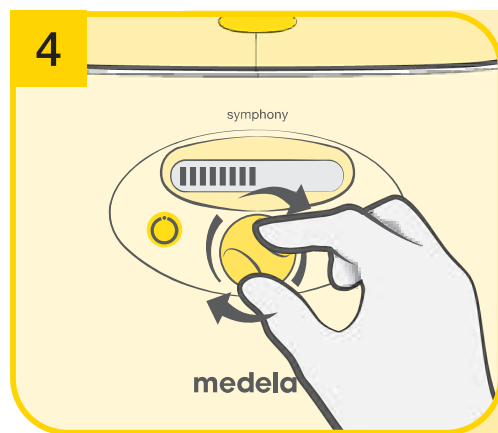

Seadke mugav vaakumi tase väljutusetapi jaoks (vt jaotis 7.3). Ekraanil olevad ribad näitavad vaakumi taset. Mida rohkem ribasid, seda tugevam on vaakum.

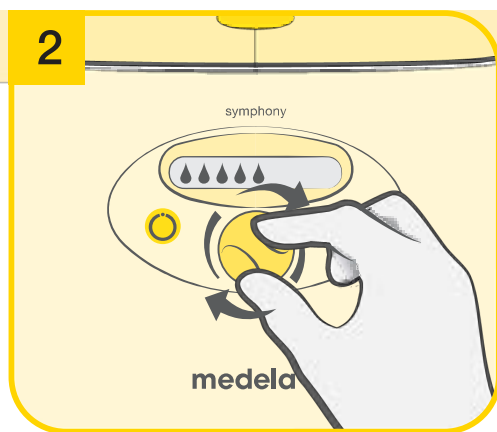


Seadke stimuleerimisetapi vaakum mugavale tasemele, keerates vaakumi reguleerimise nuppu (vt jaotist 7.3). Ekraanil olevad tilgad näitavad vaakumi taset. Mida rohkem tilkasid, seda tugevam on vaakum.

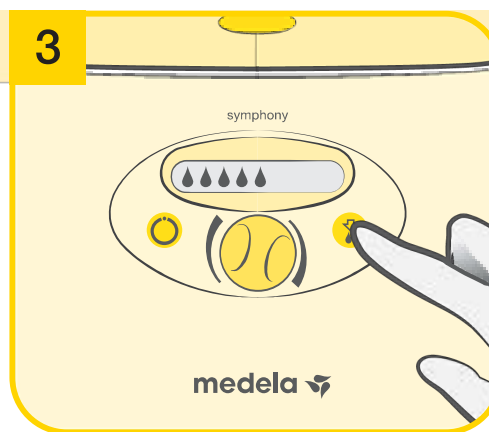

Pump lülitub kahe minuti pärast automaatselt väljutusetappi.

→ Kui piim hakkab kiiremini voolama, vajutage vabastusnuppu , et lülituda ümber väljutusetapile.

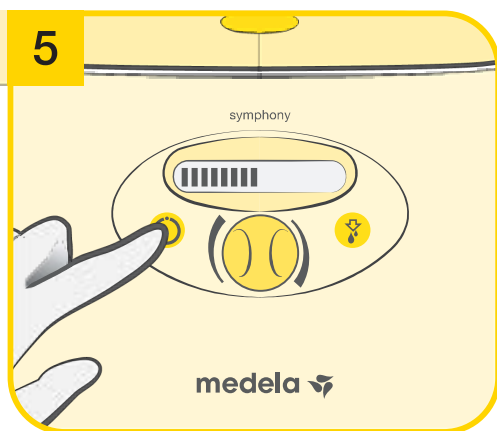

Jätkake pumpamist, kuni rinnad on hästi tühjenenud ja üleni pehmed (Medela soovib vähemalt 15-minutilist pumpamisaega). Lülitage pump välja, vajutades sisse-välja nuppu .

7. Väljutamine

32



Ettevaatust!

- I Peske enne rinna, pumbaosade ja pumba puudutamist käsi korralikult seebi ja veega (vähemalt ühe minuti vältel). Kuivatage käed puhta rätiku või paberrätikuga.
- I Pühkige rinda sooja lapiga (ärge kasutage alkoholiga niisutatud lappi).
- I Ärge hoidke pumpamise ajal kinni pumbakomplekti pudelist. See võib põhjustada piimajuhade ummistumist ning rinnapiima kogunemist ja piimapaisu.
- I Võtke ühendust ämmaemanda või imetamisspetsialistiga, kui piima saab väljutada vaid minimaalselt või üldse mitte või kui väljutamine on valulik.



Märkus


- I Lahutage Symphony rinnapump pärast piima väljutamist alati toiteallika küljest.




Teave

- I Ärge laske voolikul piima väljutamise ajal keerdu minna.

7.6 Väljutamine ühe pumpamisega

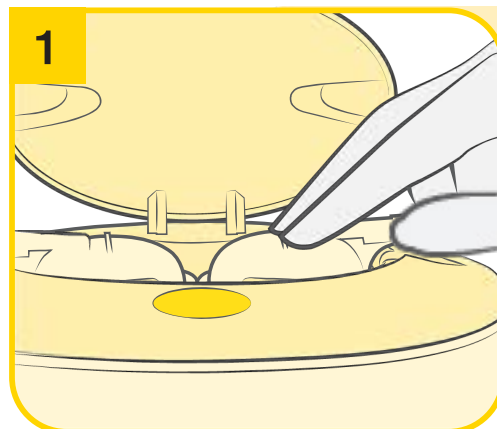


Valmistage väljutamiseks ette üks pudel ja pumbakomplekt. Paigaldage rinnapumbale ainult üks Symphony kork (vt jaotist 6.4).

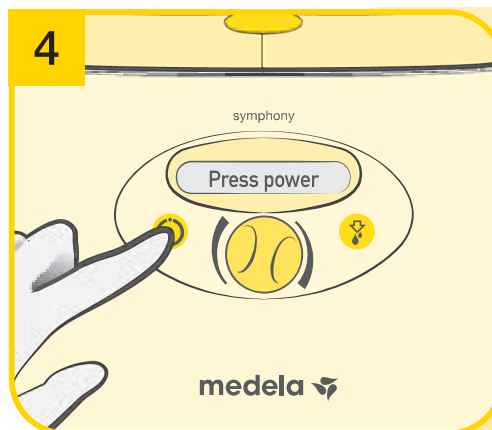


Vajutage rinnapumba sisselülitamiseks nuppu . Jätkake programmi valikuga (vt jaotist 7.1). Kasutage pumba valitud programmi kohaselt (vt jaotist 7.2, 7.4 ja 7.5).

2

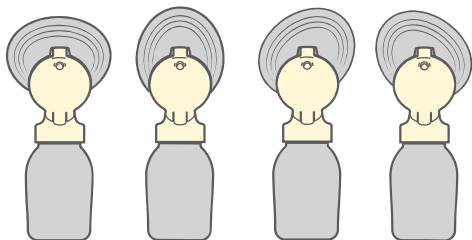


Rinnalehter PersonalFit PLUS on ovaalne ning seda saab kõige mugavama asendi leidmiseks pöörata (360°) ja soovitud asendisse asetada.

3

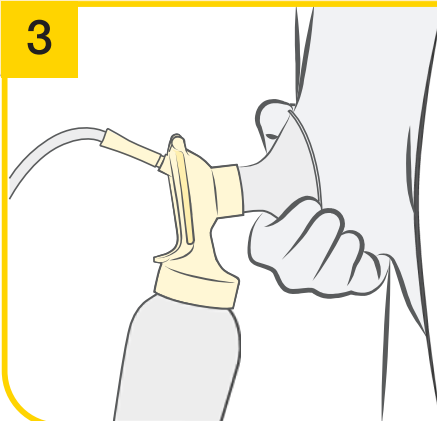

Asetage lehter rinnale nii, et rinnanibu jääks korralikult tunneli **keskele**. Hoidke rinnalehtrit pöidla ja nimetissõrmega rinnal. Toetage rinda peopesaga.

5

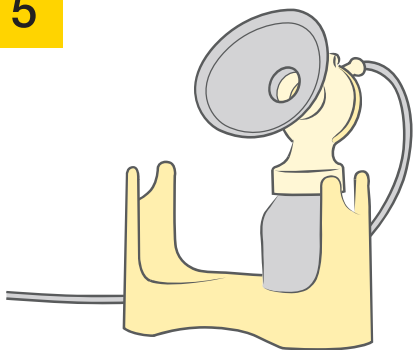

Kui väljutamine on lõppenud, asetage pudel alusele või pudelihooidikusse, et vältida selle ümberminekut.

6



Puhastage jaotises 5 toodud juhiste kohaselt.

Sulgege pudel kaanega. Rinnapiima säilitamiseks järgige jaotises 8 toodud juhiseid.

7. Väljutamine

34



Ettevaatust!

- I Peske enne rinna, pumbaosade ja pumba puudutamist käsi korralikult seebi ja veega (vähemalt ühe minuti vältel). Kuivatage käed puhta rätiku või paberrätikuga.
- I Pühkige rinda sooja lapiga (ärge kasutage alkoholiga niisutatud lappi).
- I Ärge hoidke pumpamise ajal kinni pumbakomplekti pudelist. See võib põhjustada piimajuhade ummistumist ning rinnapiima kogunemist ja piimapaisu.
- I Võtke ühendust ämmaemanda või imetamisspetsialistiga, kui piima saab väljutada vaid minimaalselt või üldse mitte või kui väljutamine on valulik.



Märkus


- I Lahutage Symphony rinnapump pärast piima väljutamist alati toiteallika küljest.




Teave

- I **Mõlemast rinnast pumpamine** aitab aega kokku hoida ja tõstab piima energiasaldust. Piima tekkimist võib pikemas perspektiivis suurendada ja alal hoida. Medela soovib topelpumpamist.
- I Ärge laske voolikul piima väljutamise ajal keerdu minna.

7.7 Väljutamine topelpumpamisega

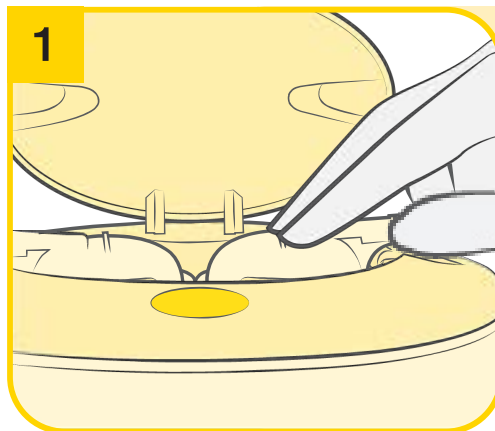

Valmistage väljutamiseks ette kaks pudelit ja pumbakomplekti. Paigaldage Symphony korgid rinnapumbale (vt jaotist 6.4).

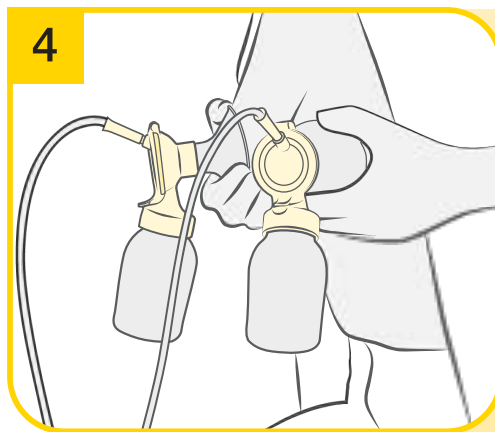


Asetage teise pudeli rinnalehter teisele rinnale nii, et nibu jääks korralikult tunneli **keskele**. Kasutage pumpa valitud programmi kohaselt (vt jaotist 7.2, 7.4 ja 7.5).

2




Asetage ühe pudeli rinnalehter esimesele rinnae nni, et nibu jääks korralikult tunneli **keskele**. Rinnalehter PersonalFit PLUS on ovaalne ning seda saab kõige mugavama asendi leidmiseks pöörata (360°) ja soovitud asendisse asetada. Rinnalehtri õiget hoidmist vaadake jaotise 7.6 etapist 3.

3

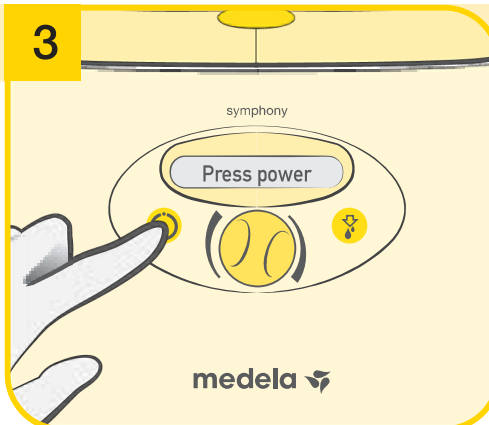

Vajutage rinnapumba sisselülitamiseks nuppu . Jätkake programmi valikuga (vt jaotist 7.1).

5

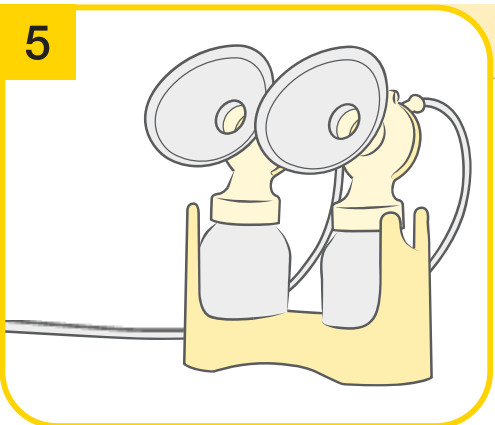

Kui väljutamine on lõppenud, asetage pudelid alusele või pudelihoidikusse, et vältida nende ümberminekut.

6



Sulgege pudelid kaanega. Rinnapiima säilitamiseks järgige jaotises 8 toodud juhiseid.

Puhastage jaotises 5 toodud juhiste kohaselt.

8. Rinnapiima säilitamine ja sulatamine

36

8.1 Säilitamine

Värskelt väljapumbatud rinnapiima säilitusjuhised

	Toatemperatuur 16 kuni 26 °C (60 kuni 78 °F)	Külmkapp 4 °C (39 °F) või madalam	Sügavkülmik −18 kuni −20 °C (0 kuni −4 °F)	Sulatatud rinnapiim
Terve õigeaegne imik	≤ 6 tundi	≤ 5 päeva	≤ 6 kuud temperatuuril −18 °C (0 °F) ≤ 12 kuud temperatuuril −20 °C (−4 °F)	Toatemperatuurini sulatatud: kasutada max 4 tunni jooksul Sulatatud külmkapi temperatuurini: kasutada 24 tunni jooksul
NICU baby	≤ 4 tundi	≤ 4 päeva	Optimaalne: ≤ 3 kuud	Ärge külmutage korduvalt!

- I Need rinnapiima säilitamise ja sulatamise juhised on soovituslikud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust ämmaemanda või imetamisspetsialistiga.
- I Ärge hoidke rinnapiima külmkapi ukseriulil. Valige rinnapiima säilitamiseks külmkapi jahedaim koht (see asub köögiviljade sektsiooni kohal oleva klaasriuli tagaosas).

8.2 Külmutamine

- I Äsja pumbatud rinnapiima võite sügavkülmutada piimapudelites või Rinnapiima säilituskottides. Ärge täitke pudeleid või kotte rohkem kui $\frac{3}{4}$ ulatuses, et võimalikuks paisumiseks jääks piisavalt ruumi.
- I Märkige pudelitele või Rinnapiima säilituskottidele piima väljutamise kuupäev.

8.3 Sulatamine



Hoiatus

Ärge sulatage külmutatud rinnapiima ega soojendage rinnapiima mikrolaineahjus või keeva veega kausis, et vältida vitamiinide, mineraalide ja muude oluliste koostisainete kadu ning rinnapiima kõrbemist.

- I Sulatage rinnapiima selle koostisosade säilitamiseks üle öö külmkapis. Teise võimalusena võite hoida pudelit või Rinnapiima säilituskotti sooja vee all (max temperatuur 37 °C/98,6 °F).
- I Keerutage ettevaatlikult pudelit või Rinnapiima säilituskotti, et eraldunud rasvakiht saaks seguneda. Vältige rinnapiima raputamist või segamist.

9. Veaotsing

9.1 Veaotsing

37

Probleem	Lahendus
Mootor ei tööta	Kontrollige, kas võrgutoide/aku on saadaval. Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud. Kontrollige, kas programmikaart on õigesti sisestatud rinnapumba tagaküljel asuvasse kaardisahtlisse.
Imivõimsus on madal või puudub	Pange pumbakomplekt kokku jaotise 6.4 juhiste kohaselt. Kontrollige, kas kõik pumbakomplekti ja rinnapumba ühendused on kindlad. Väljutage jaotises 7 toodud juhiste kohaselt. Veenduge, et rinnalehter tekitaks rinna ümber täieliku hermeetilisuse. Vt jaotist 6.4 "Pumbakomplekti kokkupanek". - I Voolikute otsad peavad olema kindlalt ühendatud konnektori kaane ja Symphony korgis oleva avaga. - I Symphony kork tuleb tihendi moodustamiseks kindlalt rinnapumba membraanile kinnitada. - I Membraan peab olema terve. - I Membraan tuleb õigesti konnektoris asetada ja konnektori kaas korralikult sulgeda. - I Ärge laske voolikul piima väljutamise ajal keerdu minna ega kinni pitsuda. - I Kõik osad peavad olema täiesti kuivad.

9. Veaotsing

38

9.2 Veakoodid

Veakoodid

Alljärgnevalt kirjeldatakse veakoode, mis võivad kuvada seadmega seotud probleemi, võimalikke põhjuseid ja probleemi lahendamise samme.

	Võimalikud probleemid	Tegevused
Sobimatu kaart	Programmikaart ei ole Symphony kaart	– Kontrollige, kas kasutatakse õiget programmikaarti
	Programmikaart on valesti sisestatud	– Kontrollige, kas kaart on õigesti paigutatud
	Programmikaart on kahjustatud ja ei tööta	– Asendage programmikaart
Kaarti pole	Programmikaart pole sisestatud	– Sisestage programmikaart
	Programmikaart pole täielikult sisestatud	– Lükake kaart lõpuni sisse
Aku tühjenemas	Aku vajab varsti laadimist ja piiksub iga 20 sekundi järel (näidu kuvamise algusest on jäänud 15 minutit pumpamisaega)	– Veenduge, et toitejuhe oleks ühendatud pumba tagaküljega
Mootori ülekoormus	Mootor võtab liiga palju voolu	– Kui seda juhtub korduvalt, võtke ühendust Rendileandjaga
Tõrge	Võimalik viga juhtimisseadme elektroonikas	– Kui seda juhtub korduvalt, võtke ühendust Rendileandjaga
Toite viga	Võimalik viga toiteallika elektroonikas	– Kui seda juhtub korduvalt, võtke ühendust Rendileandjaga

10. Garantii ja hooldus/kõrvaldamine

Garantii ja hooldus

Seadmel on kolmeaastane garantii alates ostukuupäevast, välja arvatud pumbakomplekt ja tarvikud. Akude garantii on kuus kuud. Tootja ei vastuta mis tahes kahjustuste või järelkahjude eest, mis on põhjustatud ebaõigest, sobimatust või volitamata kasutamisest. Korrapärane kontroll, hooldus ja aku vahetamine tuleb jätta Medela volitatud personali hooleks.

Medela Symphony rinnapumba projekteerimist on kontrollinud sõltumatud katseasutused, et tagada selle vastavus standardile EN/IEC 60601-1. Selliste sertifikaatide koopiad on kättesaadavad taotluse korral. Kasutatava konstruktsioonipõhimõtte tõttu eeldab Medela, et toote kasutaja jooksul ei mõjuta miski elektriohutust, tingimusel et toodet kasutatakse nõuetekohaselt, ettenähtud otstarbel ja kooskõlas nende kasutusjuhistega ning et seadet hooldatakse ja parandatakse volitatud teeninduskeskuses. Puuduvad ettenähtud või soovitatud elektriohutuse kontrollid või korduvad katsed.

Tootja esitatud teave standardi EN/IEC 62353: 2014 "Meditisiinilised elektriseadmed. Korduv katsetamine ja katsetamine pärast elektriliste meditsiiniseadmete parandust" kohaselt.

Lisaks jaotises 5 kirjeldatud puhastusprotseduuri(de)le ja aku laadimisele lisaakuga pumpadel, nagu on kirjeldatud jaotises 6, pole lisahooldust vaja. Jaotises 3 kirjeldatud kontrollidele lisaks, nt visuaalsed märgid pumba või toitejuhtme kahjustustest, pump on maha või vette kukkunud, pole lisakontrolle vaja. Nagu jaotises 3 märgitud, võib hooldust ja parandust teha ainult volitatud teenindusasutus (-keskus), järgides täielikult Symphony hooldusjuhendit ja kasutades selles nimetatud Medela originaalvaruosi. Hooldusjuhend, ühendusskeemid ja kirjeldused on taotluse korral saadaval Medelalt.

Medela leiab, et toodangu lõplik testimine asendab seadme kohapealset testimist enne kasutusele võtmist.

Symphony rinnapumba tööiga on 3000 tundi. Seadme kasutusiga, sealhulgas sisemise aku kasutusiga, on normaalsel kasutamisel seitse aastat. Tarvikute kasutusiga on kaks aastat (vt jaotist 11).

10. Garantii ja hooldus/kõrvaldamine

40

Kasutuselt kõrvaldamine

Toode on valmistatud metallist ja plastist ning seda tuleb käidelda Euroopa direktiivide 2011/65/EL ja 2012/19/EL kohaselt. Peale selle tuleb järgida kohalikke suuniseid. Vahelduv-/alalisvooluga toimivate mudelite puhul tuleb elektroonilised komponendid ja laetav aku hävitada eraldi kohalike eeskirjade kohaselt. Kõrvaldage seade ja selle lisatarvikud kohalike jäätmekäitlusjuhiste kohaselt. Tarvikud (pumbakomplekt/pudelid) on valmistatud plastist ja neid võib utiliseerida ainult kohalike eeskirjade kohaselt.

Teave kasutajale elektri- ja elektroonikaseadmete kõrvaldamiseks



See sümbol tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata sortimata olmejäätmete hulka. Selle seadme nõuetekohane kõrvaldamine kaitseb ja hoiab ära võimaliku kahju keskkonnale või inimeste tervisele. Kõrvaldamise kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust tootja, kohaliku hooldaja või tervishoiuteenuse osutajaga. See sümbol on kasutusel ainult Euroopa Liidus. Järgige oma riigi elektri- ja elektroonikaseadmete kõrvaldamise kohta kehtivaid asjakohaseid seadusi ja eeskirju.

11. Terviklik hoolitsus rinnaga toitmise ajaks

Kontrollige konkreetsetes riigis saadavust kohalikult veebisaidilt/ kohalikest poodidest.


Rinnalehter PersonalFit PLUS S (21 mm)*
Rinnalehter PersonalFit PLUS M (24 mm)*
Rinnalehter PersonalFit PLUS L (27 mm)*
Rinnalehter PersonalFit PLUS XL (30 mm)*
Rinnalehter PersonalFit PLUS XXL (36 mm)*

150 ml rinnapiimapudel (3 tk pakendis)
250 ml rinnapiimapudel (2 tk pakendis)

Artiklid ei pruugi kõigis riikides saadaval olla. Kõigi Medela toodete kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga või külastage veebisaiti www.medela.com.


* Kui piima väljutamise tulemused ei ole rahuldavad või kui piima väljapumpamine on valulik, võtke ühendust imetamisnõustaja või -spetsialistiga. PersonalFit PLUS rinnalehtri erinevad suurused võivad muuta piima väljutamise mugavamaks ja tulemuslikumaks.

12. Technical specifications

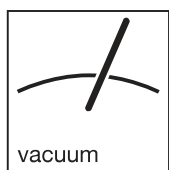


Vaakum (ligikaudne)


-50 ... -250 mmHg
-7 ... -33 kPa
35 ... 120 cpm

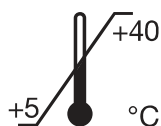

Kasutamine

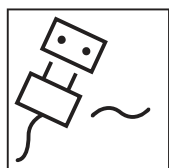

100–240 V ~
50/60 Hz
0.5 A

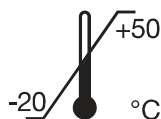


Transport/säilitamine



T 0.8 A, 250 V
(aeglane surve)
5 x 20 mm L = madal purunemisvõime




Kasutamine/transport/säilitamine

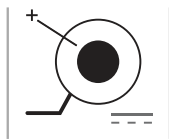

12 V — /1.2 A
T 2.5 A
(aeglane surve)


Autoadapter

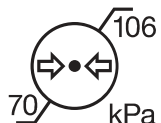


Kasutamine/transport/säilitamine



2 x 6V, 1200 mAh
Pb (pliihape)

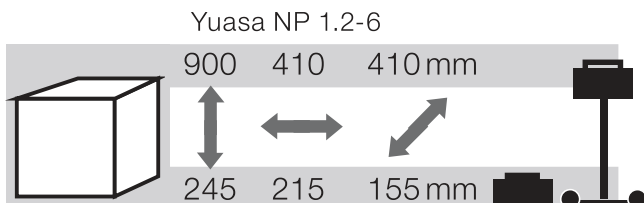

Yuasa NP 1.2-6

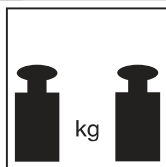

2.841 kg

2.241 kg

**Medela AG**

Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Switzerland
www.medela.com

International Sales

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar
Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
www.medela.com

